

# ШПРИЦ 3мл эндодонтический для ирригации корневых каналов



Трехкомпонентный шприц 3мл, индивидуально упакован в блистер, игла надета на шприц. Шприц имеет плавный ход поршня за счёт резиновой манжеты на поршне. На прозрачной герметичной колбе нанесена шкала несмываемой краской. Модифицированный упор для пальцев, имеющий выраженную ребристость, позволяет надежно удерживать шприц во время инъекции. Изумрудный пластиковый поршень.

Эндодонтический шприц — инструмент, используемый стоматологами на этапе подготовки к пломбированию. С помощью эндошприца происходит ирригация корневых каналов специальным антибактериальным раствором — гипохлоритом натрия. Эндодонтический шприц изготовлен по особой инновационной технологии, полностью безопасен и удобен в эксплуатации. Конструкция совместима с эндодонтическими иглами, оснащенными специальной проточкой и закручивающимися замками. В комплекте со шприцом поставляются эндодонтические иглы, уникальная конструкция которых исключает введение раствора в заапикальную область и образование высокого давления в зоне обработки. Особая проточка иглы позволяет жидкости устремиться в нужном направлении — прямо в корневой канал, в результате чего антисептический раствор удастся направить собственно в пульповую камеру.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём.....3мл

Тип разъёма.....luer-lock

Игла.....30G (0,3 x 25мм)


Разъём.....центральный

Упаковка.....240шт

Производитель .....SitekMed (Китай)

Срок годности .....5 лет

Рег.удост. .... ФСЗ 2007/00530 от 21.11.2007

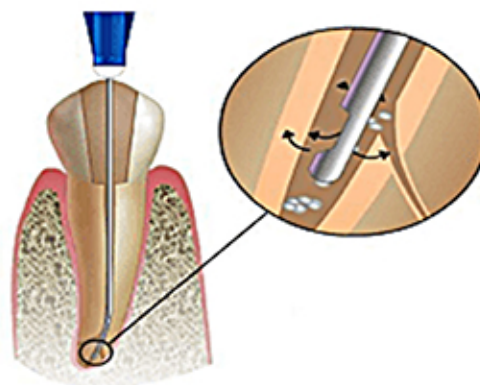

ПРЯМОЙ ИМПОРТЁР ● ТОВАР НА СКЛАДЕ ● ОТГРУЗКА ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ  
ДОСТАВКА ● ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 24/7 ● ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ● ОБРАЗЦЫ В ПОДАРОК ● КОНСУЛЬТАЦИИ